


ドイツ Sonation 社製 nano LC/MS 用カラムオーブンの特徴

制御用ソフトウェア


お使い頂いているthermoFisher社LC/MS 制御用PCに専用ソフトをインストールすることでモニター上にアイコンが表示されます。

表示されたアイコンをダブルクリックすることで、LC/MS 制御画面が表示されている上に、温度制御用ウィンドウが表示され簡単に温度設定ができます。

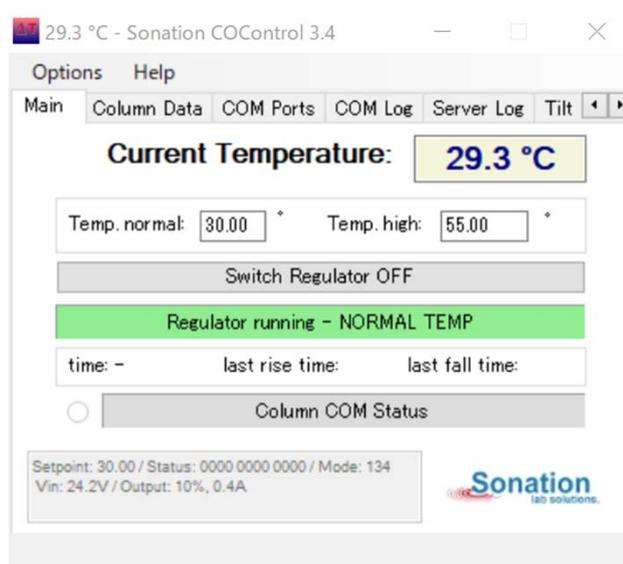

簡単な設置


ThermoFisher社LC/MS用ナノイオン源に簡単に取り付けすることができます。

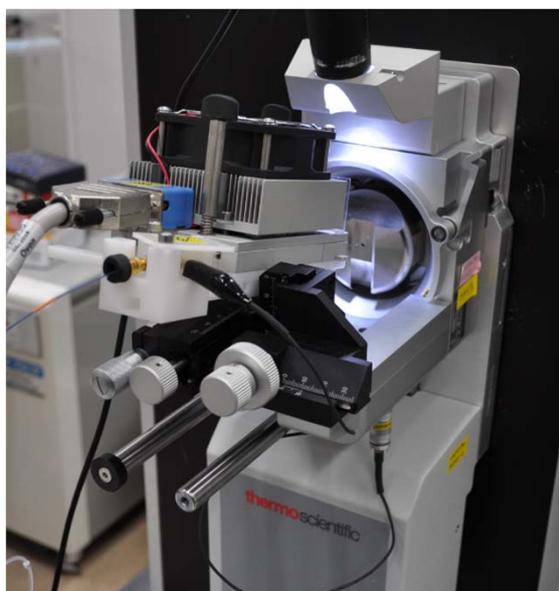

キャピラリーカラムのセット

長さの短いキャピラリーカラムから長いキャピラリーカラムでも簡単にカラムオープン内にセットする事ができます。

長さに応じて内部のピンの位置を変更することで長さの違いに応じた調節が可能。キャピラリーカラムの先端はワンタッチで固定できます。接続部はカラムの長さに応じて2カ所を選ぶことができます。

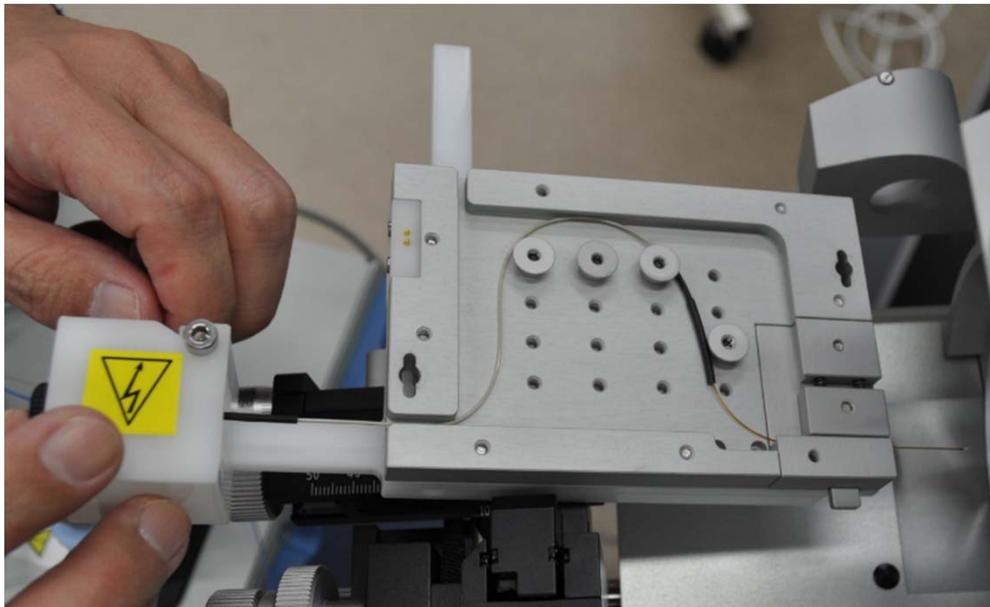

制御用ソフトウェア

お使い頂いているthermoFisher社LC/MS 制御用PCに専用ソフトをインストールすることでモニター上にアイコンが表示されます。

表示されたアイコンをダブルクリックすることで、LC/MS 制御画面が表示されている上に、温度制御用ウィンドウが表示され簡単に温度設定ができます。

